



Menus

Vigilens Designer

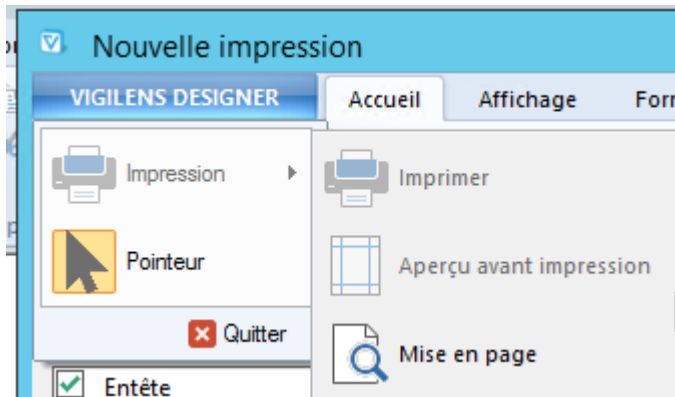


Ce menu rapide propose quelques actions courantes d'impression, et aussi une icône Pointeur qui permet de désélectionner l'outil courant.


Accueil

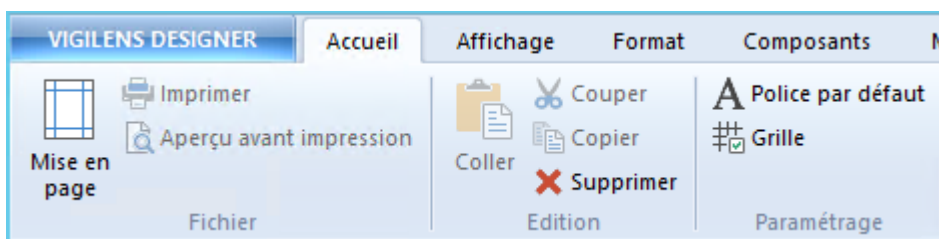



Ce menu propose :

- les outils classiques d'impression et d'édition
- le choix de la police par défaut
- la configuration de la grille du rapport

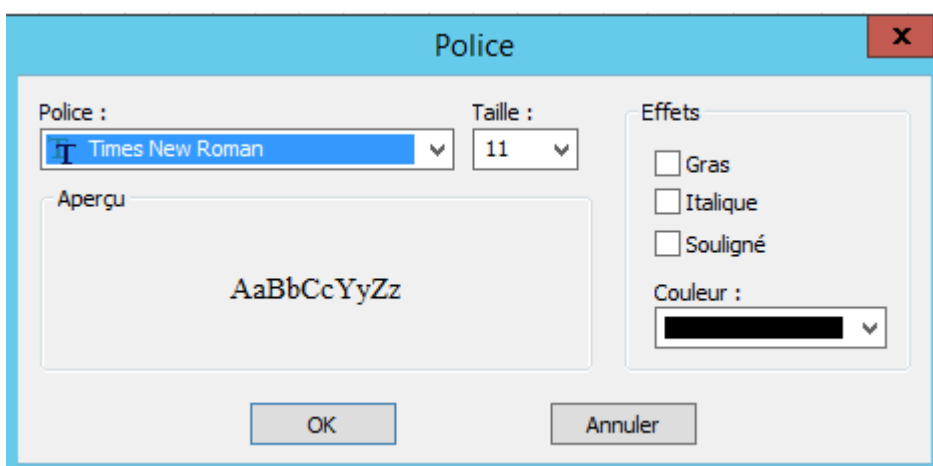


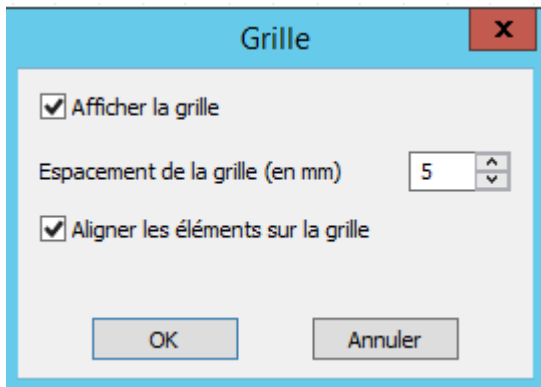

La grille est “magnétique” : lorsqu'on déplace les objets à la souris, ils viennent se “coller” à la grille, qu'elle soit affichée ou non. Si on veut déplacer finement un objet sans qu'il soit sur la grille, il est nécessaire passer par les options de l'objet (voir ci après).

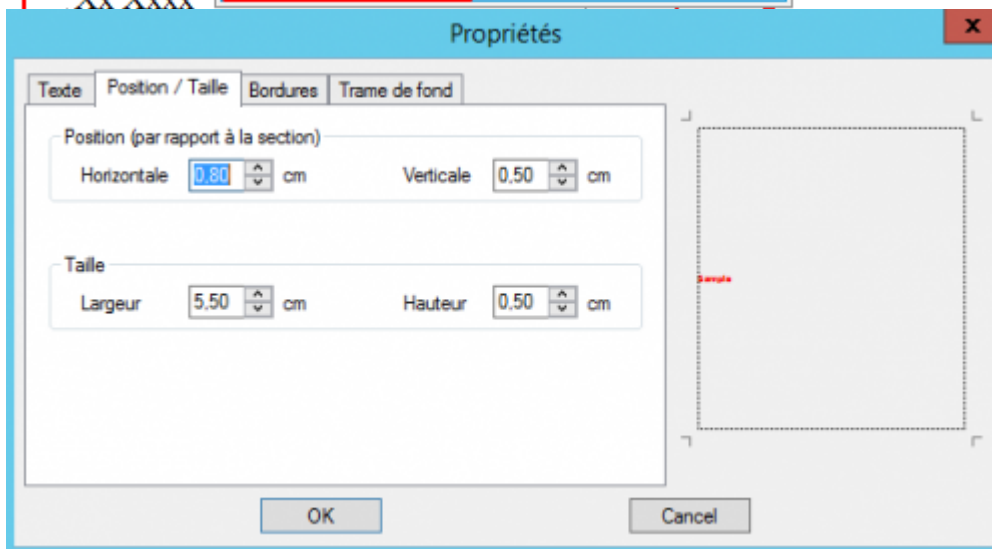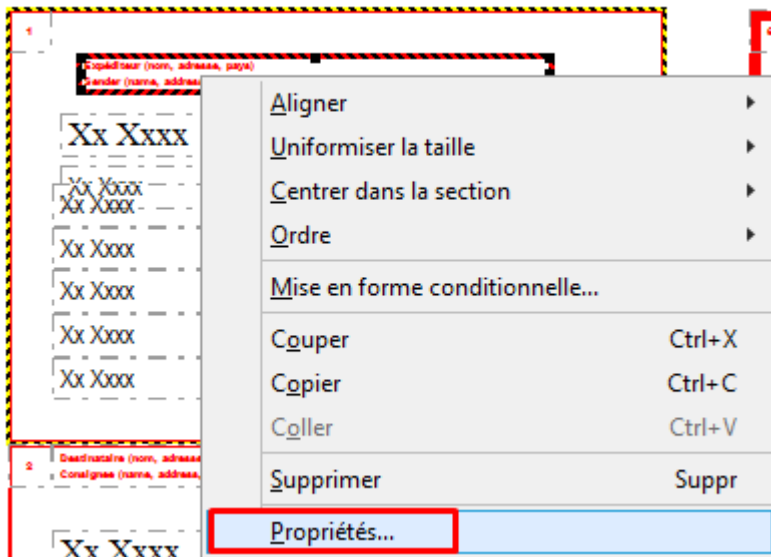


Affichage

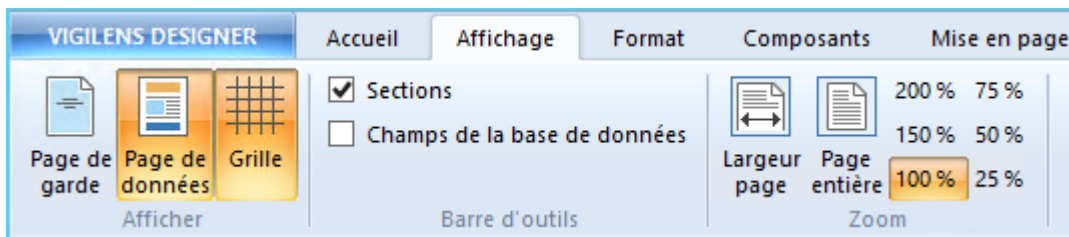

Afficher

Lors de la création d'un rapport, il est possible de le faire précéder d'une page de garde. Les boutons suivants permettent de basculer entre l'édition de la page de garde et de la page de données.

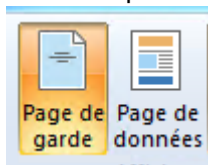


Le dernier bouton sert à afficher ou masquer la grille.




Grille active :



Grille inactive :

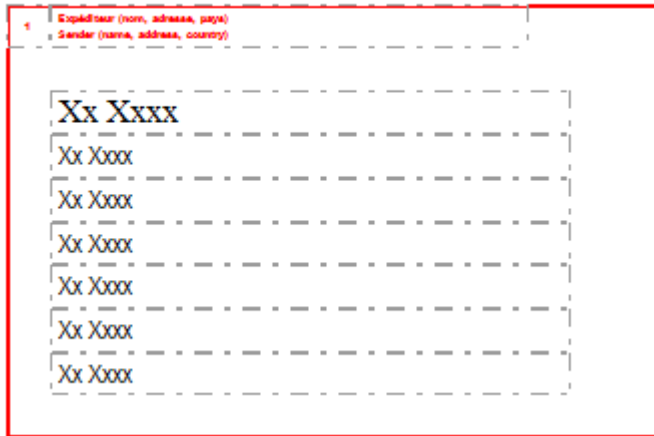


Barre d'outils

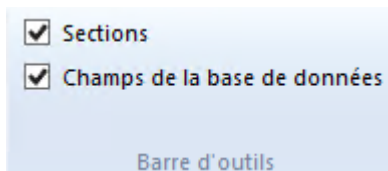


Afficher ou masquer les panneaux [Section](#) et [Champs de la base de données](#).

Zoom

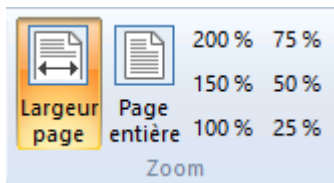


Choix du niveau de zoom, avec possibilité d'ajustement automatique pour afficher soit l'intégralité de la page sur l'écran, soit adapter le niveau de zoom pour avoir toute la largeur du rapport dans l'écran d'édition.


Zoom pleine largeur :

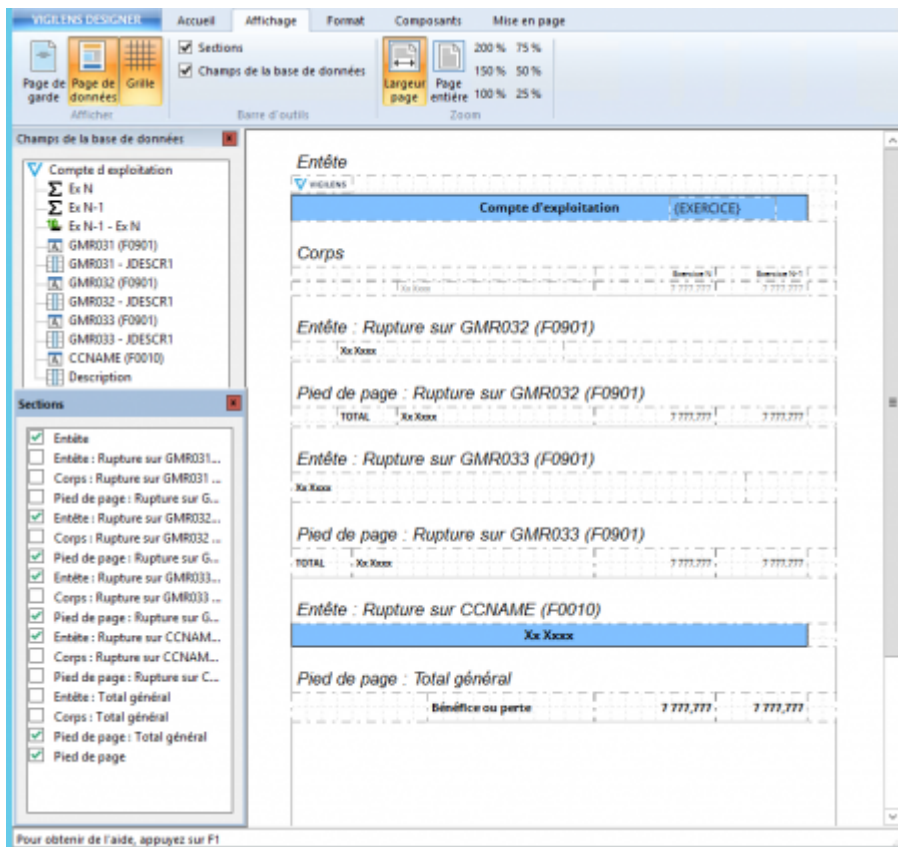

Zoom pleine page :

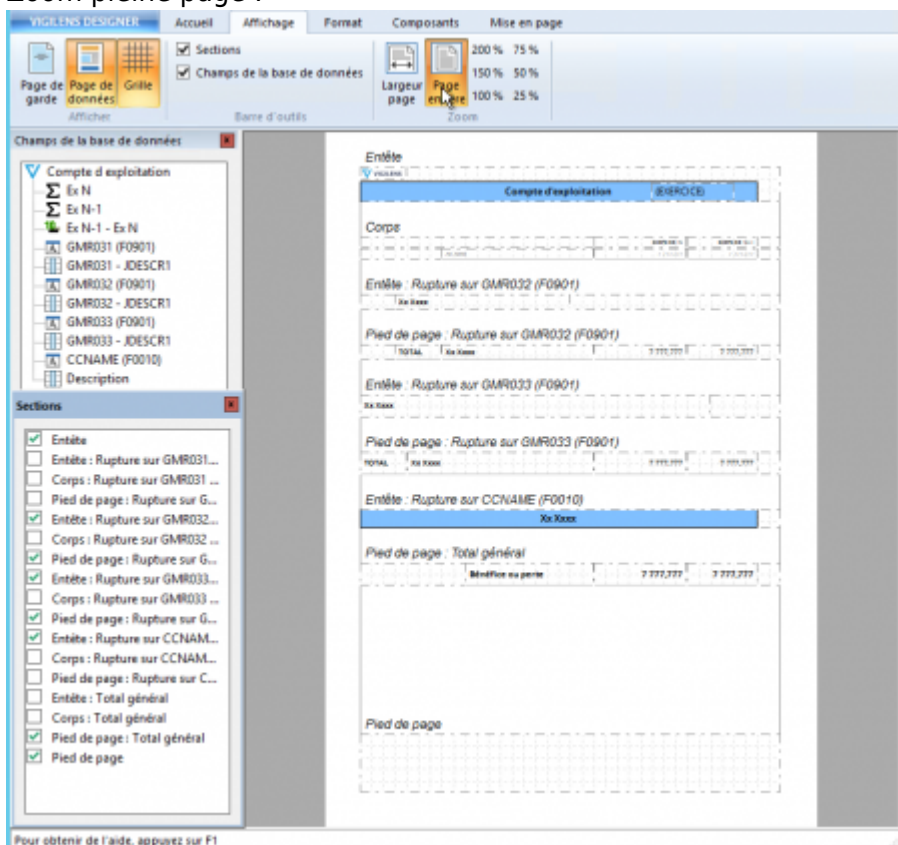


Format

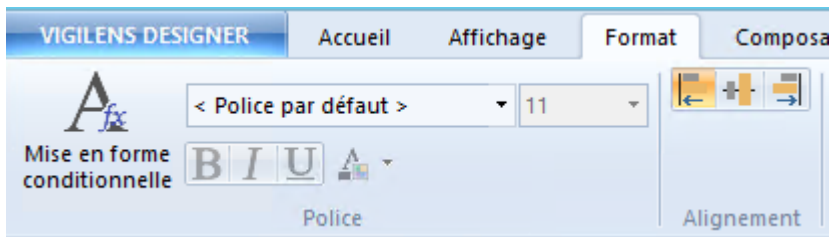

Permet l'édition des paramètres de base d'un champ : options de police de caractère, alignement du texte, mise en forme conditionnelle.


Pour accéder à tous les paramètres d'un champs, il faut le sélectionner > clic droit > Propriétés ou aller dans le menu Composants > Propriétés

Composants

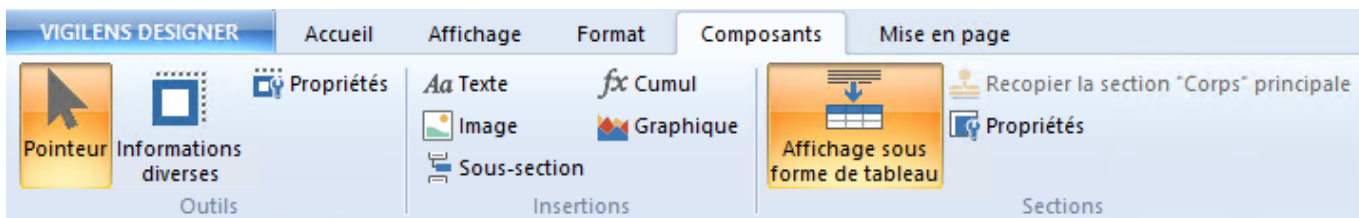


[Page dédiée](#)

Mise en page

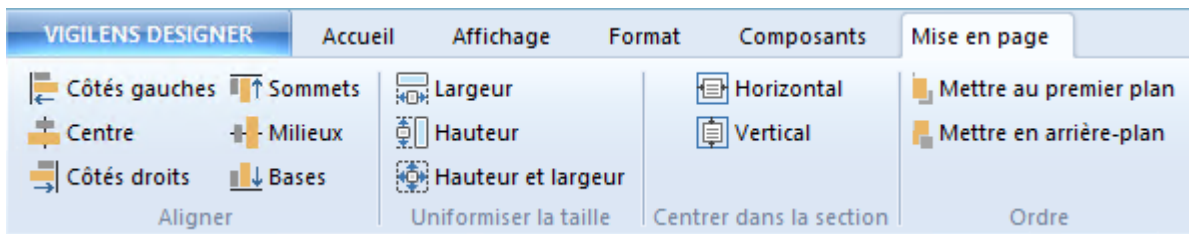

Aligner

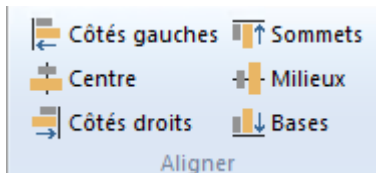


Ces boutons ne sont utilisables que lorsque plusieurs éléments sont sélectionnés simultanément. Pour faire une sélection multiple, il faut maintenir le bouton majuscule et cliquer successivement sur tous les objets de la sélection. On ne peut sélectionner simultanément que des objets d'une seule et même section ou sous-section.




C'est le **dernier** objet sélectionné qui servira de référence pour aligner les autres.

Uniformiser la taille

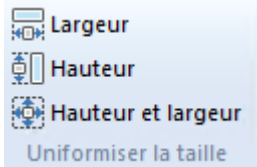


Tout comme pour les outils d'alignement, les outils d'uniformisation de la taille nécessitent une sélection d'au moins 2 objets, et c'est le dernier objet sélectionné qui est le modèle.

Centrer dans la section

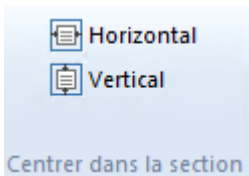

Ordre

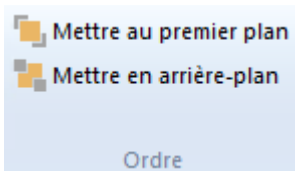

- [contenu]à faire
- [orthographe]à faire
- [liens_internes]à faire
- [liens_casss]à faire
- [page_absente]à faire
- [todo]à faire
- [coherence_graphique]à faire
- [taille_images]à faire
- [version_mobile]à faire
- [version_anglaise]à faire

From: <https://vigilens.wiki/dokuwiki/> - **Vigilens Reporting Knowledge Garden**

Permanent link: https://vigilens.wiki/dokuwiki/doku.php?id=v8_0_0:designer:menu:accueil:nouvellerequete:editeurimpression:menu:start&rev=1593699272

Last update: **2020/07/02 16:14**

